

Mecânica e Campo Eletromagnético

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

TRABALHO 1.1: MOVIMENTO DE PROJÉTEIS

Objetivos

- Determinar a velocidade inicial do projétil através das equações do movimento
- Verificar a dependência do alcance com o ângulo de lançamento
- Determinar a velocidade inicial do projétil utilizando um pêndulo balístico

1. INTRODUÇÃO

A posição de um projétil, de massa M e velocidade inicial v_0 , (com componentes v_{0x} e v_{0y}) que se desloca no plano (x, y) é dada por:

$$x = x_0 + v_{0x}t\cos\theta_0 \tag{1}$$

$$y = y_0 + v_{0y}t\sin\theta_0 - \frac{1}{2}gt^2$$
 (2)

onde g é a aceleração da gravidade, t é o tempo, x_0 e y_0 são as coordenadas da posição inicial do projétil e θ_0 é a inclinação do vetor velocidade inicial relativamente ao eixo dos x. Eliminando a variável t das equações (1) e (2), obtém-se uma nova equação para o alcance x em função do ângulo que permite determinar o ângulo correspondente ao alcance máximo, θ_{amax} . Se um corpo é lançado de uma altura y_i e atinge uma altura final y_f , θ_{amax} é dado por:

$$\theta_{amax} = arctg \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2g(y_i - y_f)}{v_0^2}}} \tag{3}$$

Se o valor da altura inicial for igual ao da altura final ($y_i = y_f$) então, $tg \theta_{amax} = 1$ pelo que $\theta_{amax} = 45^\circ$.

PÊNDULO BALÍSTICO

O pêndulo balístico consiste numa massa M suspensa de um fio ou uma barra. Se um projétil de massa m ($m \ll M$) for disparado contra a massa M e nela ficar retido, então o conjunto adquire energia cinética, E_c , que, à medida que o pêndulo se move, vai sendo transformada em

energia potencial gravítica, E_{ρ} . A altura máxima, h, atingida será tal que a energia potencial gravítica máxima é igual à energia cinética inicial, devido à conservação da energia mecânica. Considerando v_0 a velocidade inicial do projétil e v_2 a velocidade do conjunto massa + projétil, logo após a colisão, obtém-se:

$$E_C(inicial) = \frac{1}{2}(m+M)v_2^2 = (m+M)gh = E_p(max)$$
 (4)

A conservação de momento linear na colisão implica que:

$$mv_0 = (m+M)v_2 \tag{5}$$

de onde se tira a relação entre a velocidade inicial v_0 e a altura h:

$$v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right)\sqrt{2gh} \tag{6}$$

2. PREPARAÇÃO DO TRABALHO1

- Serão as equações (1) e (2) aplicáveis ao movimento de um projétil de longo alcance?
 Assuma a ausência de atrito. Justifique, sucintamente, a sua resposta.
- 2. Elimine a variável t das equações (1) e (2) e obtenha a equação para o alcance x.
- 3. Utilizando a equação (3), determine θ_{amax} supondo que $y_i y_f = 0.2 m$ e $v_0 = 3 ms^{-1}$.
- 4. No lançamento do projétil, o efeito do atrito do ar é desprezável. Para atingir a melhor marca possível, um atleta utilizará um ângulo de lançamento superior, inferior ou igual a 45°? Justifique a sua resposta.
- 5. Deduza a equação (6) a partir das equações (4) e (5).
- 6. Considerando v = s/t e utilizando a teoria da propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade de um projétil, em movimento retilíneo uniforme.
- 7. Deduza a relação entre h, o comprimento do pêndulo, l, e α , tendo em conta a Figura 4, bem como o respetivo erro associado, utilizando a fórmula de propagação dos erros.
- 8. Utilizando a equação (6) e recorrendo à teoria de propagação dos erros, determine a equação para o erro associado à velocidade inicial, v_0 .

2

¹ Se tiver dúvidas consulte o docente.

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A Figura 1 mostra uma fotografia da montagem experimental. Identifique os elementos descritos no material fornecido.



Figura 1. Esquema da montagem experimental disponível na aula.

MATERIAL FORNECIDO

- Lançador de projéteis
- Sensores de passagem
- Sensor de impacto
- Esfera

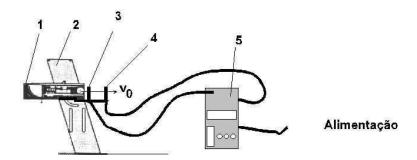


Figura 2. Esquema da montagem experimental (experiência A). 1- Lançador de projéteis (LP); 2- Base de fixação para o LP; 3-Sensor de passagem (inicia a contagem do tempo); 4-Sensor de passagem (termina a contagem do tempo); 5-Sistema de controlo dos sensores.

Parte A - Determinação da velocidade inicial

- **1.** Efetue a montagem de acordo com a figura tendo o cuidado de:
 - a. fixar a base (2) à mesa com um grampo adequado e colocar o LP na posição horizontal.
 - b. garantir que o sistema de controlo (5) está ligado à fonte de alimentação e que se encontra na posição de desligado (OFF).

- c. garantir que o sensor (3) está colocado imediatamente à saída do LP (1) e que o sensor (4) está ligado ao sistema de controlo (5).
- **2.** Meça a distância, *s*, entre os sensores.
- **3.** Carregue o LP na posição de tiro curto "SHORT RANGE". Colocar a esfera na boca do LP, empurrá-la para o interior com a vareta de carregar (tubo de plástico preto) até o indicador amarelo, no LP, se encontrar na posição pretendida.
- **4.** Coloque o sistema de controlo (5) na posição de "TWO GATES". Carregar em START/STOP.
- **5.** Dispare o LP puxando o fio do disparador verticalmente e com suavidade. Registe o tempo indicado pelo sistema de controlo (5).
- **6.** Repita os passos de 1) a 5) para <u>5 medidas</u>. Tenha o cuidado de verificar a horizontalidade do LP antes de cada lançamento.

Parte B - Dependência do alcance com o ângulo de disparo

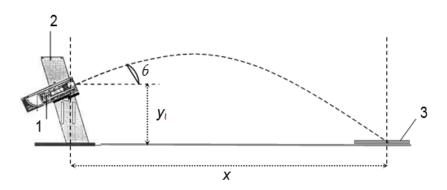


Figura 3. Esquema da montagem experimental (experiência B). 1-Lançador de projéteis (LP); 2-Base de fixação para o LP; 3-Alvo.

- 1. Efetue a montagem de acordo com a figura tendo o cuidado de fixar a base (2) à mesa com um grampo adequado e colocar o LP a um ângulo de 30° com a horizontal.
- **2.** Coloque o alvo (conjunto de papel químico + papel milimétrico) a uma distância, tal que a esfera caia sobre a sua superfície. A distância é determinada por tentativa e erro.
- 3. Carregue o LP na posição de tiro curto "SHORT RANGE" com a esfera.
- **4.** Dispare o LP. Registe o alcance *x* (com a fita métrica), e o ângulo de lançamento θ. **Repita** mais duas vezes, tendo o cuidado de verificar se o ângulo de lançamento se mantém constante.

- 5. Repita os pontos 3 e 4, para ângulos entre 34° e 50°. Identifique o número de valores de ângulo necessários bem como o respetivo incremento angular (ou seja, que ângulos deve usar e qual a diferença entre os mesmos).
- **6.** Meça, em relação à bancada, a altura, *y*_i, a que a esfera é lançada.

Parte C - Pêndulo Balístico: Método alternativo para determinação da velocidade inicial de um projétil

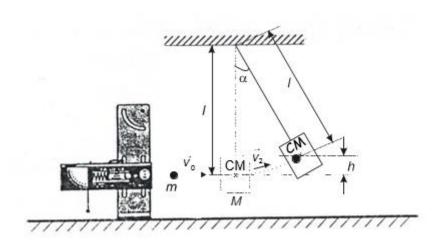


Figura 4. Esquema da montagem experimental (experiência C).

- 1. Meça as massas do projétil, m, e do pêndulo, M.
- 2. Meça o comprimento do pêndulo, I.
- 3. Carregue o LP na posição de tiro curto "SHORT RANGE".
- **4.** Efetue um disparo e meça o ângulo máximo, α , descrito pelo pêndulo.
- 5. Repita o ponto anterior mais 4 vezes.

4. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS

Com base nesta secção, deverá preparar o relatório preliminar <u>obrigatoriamente</u> entregue ao docente no final de cada aula do trabalho.

Parte A - Determinação da velocidade inicial

- Calcule a média dos 5 tempos medidos e o erro respetivo, Δt .
- Determine a velocidade inicial v_0 e o erro respetivo, Δv_0 .
- Indique qual a maior fonte de erro. Discuta estratégias para melhorar o resultado obtido.

Parte B - Dependência do alcance com o ângulo de disparo

- Para cada ângulo θ_0 , determine a média dos 3 alcances obtidos, x_{ob} (não é necessário determinar o respetivo erro associado).
- Verifique a dependência do alcance médio, x_{ob} , com o ângulo de lançamento, θ .
- Faça o gráfico de x_{ob} médio em função de θ .
- Determine o ângulo θ_{max_ob} , correspondente ao alcance máximo observado. Atendendo a que está a fazer uma amostragem discreta considere o erro associado θ_{max_ob} igual a 1°.
- Comente os resultados obtidos.

Parte C - O Pêndulo Balístico

- Calcule a média dos ângulos, α , e o erro respetivo, $\Delta\alpha$.
- Determine o valor da altura, h, e o erro respetivo, Δh .
- Obtenha um valor final para v_0 , e para o respetivo erro, Δv_0 .
- Determine qual a maior fonte de erro. Discuta estratégias para melhorar o resultado obtido.
- Compare a velocidade inicial com a obtida na parte A.
- Comente a exatidão e a precisão dos valores obtidos.

<u>Sugestão:</u> No sentido de gerir da melhor forma o trabalho experimental durante as 3 aulas a ele destinadas, o trabalho experimental deverá ser dividido. Assim, na aula 1 deverão concluir a parte A e iniciar a parte B; na aula 2 deverão terminar a parte B e dar início à parte C; nas aulas 3 e 4 deverão terminar o trabalho e finalizar o relatório para avaliação a ser entregue no final da aula 4. *No final de cada aula, deverá ser entregue um relatório sumário com os resultados obtidos.*

BIBLIOGRAFIA

- [1] Serway, R. A., Physics for Scientist and Engineers with modern Physics, 2000, Saunder College Publishing.
- [2] Alonso & Finn, *Física um curso universitário*, vol. 1, 3ª edição, editora Edgard Blucher, 1981: Cap.5 e 7.
- [3] R. Resnick e D. Halliday, *Física*, vol. 2, 4ª ed., editora Livros Técnicos e Científicos, 1990.